

## Dele/tilbehør



### Ventilationsposer

- 870150 Ventilationspose til voksen, 1600 ml
- 860150 Ventilationspose til barn, 500 ml
- 850150 Ventilationspose til baby, 240 ml

### Masker

- 851500 Silikonemaske til baby, str. 0/0
- 851600 Silikonemaske til baby, str. 0/1
- 851700 Silikonemaske til baby, str. 2
- 860220 Silikonemaske til barn, str. 3/4, m. maske overlæg
- 870220 Silikonemaske til voksen, str. 4/5+, m. maske overlæg
- 872220 Voksen og barn silikone maske sæt
- 865200 Maske overlæg (separat) til maskestr. 3/4
- 865200 Maske overlæg (separat) til maskestr. 4/5+
- 870400 Laerdal hoveddrem m. holder
- 871300 Holder til standard hoveddrem (ikke vist)

### Indsugnings-/reservoirventil

- 875400 Indsugnings-/reservoirventil
- 531901 O<sub>2</sub>-reservoirpose, 2,6 l
- 551901 O<sub>2</sub>-reservoirpose, 0,6 l
- 871950 Klapventiler, pkg. 3.

### Patientventil

- 560200 Patientventil
- 851250 Patientventil m. 35cm H<sub>2</sub>O overtryksventil
- 851350 Patientventil m. 35cm H<sub>2</sub>O overtryksventil og låseklemme
- 851103 Låseklemmer til overtryksventil (pkg. 10)
- 851252 Overtryksventil, 35cm H<sub>2</sub>O
- 540103 Læbeventil
- 540105 Skivemembraner (10-pk.)
- 850500 Eksspirationsafleder (OD 30mm)
- 850900 Manometermuffe

### Opbevarings-kuffetter og andet tilbehør

- 871000 Forlængerslange af silikone (28 cm)
- 850700 Opbevaringskuffert m. gennemsigtig låg, baby
- 860300 Opbevaringskuffert m. gennemsigtig låg, barn
- 870600 Opbevaringskuffert m. gennemsigtig låg, voksen
- 521100 Vægholder til opbevaringskuffert m. låg, baby/barn
- 572000 Vægholder til opbevaringskuffert m. låg, voksen (ikke vist)
- 860420 Opbevaringskuffert, voksen
- 860410 Opbevaringskuffert, baby/barn
- 870120 Ophængningsring
- 511700 Vægbeslag
- 875500 Opdateringspakke, voksen - (indsugnings-/reservoirventil, maske overlæg låg str. 3/4 og 4/5+)
- 865500 Opdateringspakke, barn - (indsugnings-/reservoirventil, maske overlæg str. 3/4, 35 cm H<sub>2</sub>O overtryksventil)
- 855500 Opdateringspakke, baby - (indsugnings-/reservoirventil, 35 cm H<sub>2</sub>O overtryksventil)



Models	Voksen			Børn			BABY		
	Basis u. maske	Standard	Komplet	Basis u. maske	Standard Barn	Standard stor Baby	Komplet	Basis u. maske	Komplet
<b>Karton</b>	870050	870052	870051	860050	860052	860056	860051	850050	850051
<b>Compact Case</b>			870053				860053		850053
<b>Display Case</b>			870055				860055		850055
<b>Resuscitator</b> 1600 ml	*	*	*						
500 ml				*	*	*	*		
240 ml								*	*
<b>Patient ventil m. tryk begrænser</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Maske</b> 0/0				*	*	*	*	*	*
0/1				*	*	*	*	*	*
3/4 m/maske overlæg			*	*	*	*	*	*	*
4/5+ m/maske overlæg		*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Indsugnings-/res.ventil</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Reservoir pose</b> 2600	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>600</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*
<b>Brugsanvisning</b>	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel.

### Vigtigt:

Ventilationspose med maske må kun anvendes af personer, som har modtaget tilstrækkelig undervisning deri.



Opbevaringskuffert

Æske med plastpose



0434 Dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlig krav i Direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

**Norway:** LAERDAL MEDICAL AS  
PO Box 377, N-4002 Stavanger  
Tel. +47 51 51 17 00, Fax +47 51 52 35 57  
E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

**Australia:** LAERDAL Pty Ltd. (ABN 47 003 817 490)  
23 Edward Street, Oakleigh, Victoria 3166  
Tel. +61 3 9569 4055, Toll free 1800 331 565  
Fax +61 3 9569 4028, Toll free 1800 635 835  
E-mail: customerservice@laerdal.com.au

**Benelux:** "The Laerdal BeNeLux House"  
Dijkstraat 54, NL-5554 PS VALKENSWAARD  
Tel. +31 40 208 58 00, Fax +31 40 208 58 02  
E-mail: laerdal.benelux@laerdal.no

**Canada:** LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.  
151 Nashdene Rd., Unit #45  
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3  
Tel. +1 (416) 298-9600  
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)  
ou en français (800) 567-9987  
Fax +1 (416) 298-8016  
E-mail: save.lives@laerdal.ca

**Denmark:** LAERDAL DANMARK  
Postboks 225, DK-8600 Silkeborg  
Tel. +45 80 333 112, Fax +45 80 333 555  
E-mail: laerdal.denmark@laerdal.no

**Eastern Europe:** LAERDAL C.E. EUROPE  
A-1060 Vienna, Mariahilferstr. 10/1/3  
Tel. +Fax +43 15877140, Tel. +43 15815927  
E-mail: mistam@aon.at

**Far East:** LAERDAL Singapore Pte Ltd  
No 1 Marine Parade Central  
#13-05, Parkway Centre Singapore 449408  
Tel. +65 63464259, Fax +65 63467523  
E-mail: admin@laerdal.com.sg

**Finland:** LAERDAL OY  
Vatturiemennanta 2, 00210 HELSINKI  
Puhelin +358 (0)9-612 99 80,  
Telekopio +358 (0)9-692 77 99  
E-mail: laerdal.finland@laerdal.no

**France:** LAERDAL MEDICAL FRANCE  
1 rue des Vergers - Bâtiment n° 5 - 69578 Limonest Cedex  
Tel. +33 (0)4 72 52 02 52, Fax +33 (0)4 78 35 38 45  
E-mail: laerdal.france@laerdal.no

**Germany:** LAERDAL MEDICAL DEUTSCHLAND GmbH  
Am Loderfeld 56, 81249 München  
Tel. +49 (0)89 / 864 954-0, Fax +49 (0)89 / 864 34 84  
E-mail: info@laerdal.de

**Italy:** LAERDAL ITALIA s.r.l.  
Via Piero Gobetti 52/2 int.Z. 40129 Bologna  
Tel. +39 051-355587, Fax +39 051-355598  
E-mail: laerdal.italia@laerdal.no

**Japan:** LAERDAL MEDICAL JAPAN K.K.  
Shinjuku IS Bldg. 8F  
2-13-12, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022  
Tel. 81-3-5919-2121, Fax 81-3-5919-2122  
E-mail: laerdal.japan@laerdal.co.jp

**Malaysia:** LAERDAL HOSPLINE Sdn Bhd  
12 Jalan Titir 33/25, Section 33, Shah Alam Technology Park,  
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,  
Tel. +60 (3) 51 22-7002, Fax +60 (3) 51 22-5650  
E-mail: sales@hospline.com

**New Zealand:** LAERDAL NEW ZEALAND Ltd  
(GST Number 79-403-636)  
PO Box 302664, North Harbour, Auckland 1330  
Tel. +61 3 9564 4066, Toll free 0800 523 732  
Fax +61 3 9563 3368, Toll free 0800 528 852  
E-mail: customerservice@laerdal.co.nz

**Portugal:** LAERDAL ESPANA, Sucursal em Portugal  
Rua da Bela Vista à Graça, no.31 A. Escritorio 9,  
1170-054 Lisboa  
Tel. (+351)-21-816-6567, Fax (+351)-21-816-6568,  
Mob. (+351)-918765367

**Spain:** LAERDAL ESPANA S.L.  
Manuel Tovar 19, 28034 Madrid  
Tel. (+34) 902-291110, Fax (+34) (91)-7291125  
E-mail: laerdal.spain@laerdal.no

**Sweden:** LAERDAL MEDICAL AB  
Box 2064, Paviljongvägen 3-5, 132 02 Saltsjö-Boo  
Tel. +46 (0)8-55614610, Fax +46 (0)8-55614619  
E-mail: Laerdal.sweden@laerdal.se

**United Kingdom:** LAERDAL MEDICAL LTD.  
Laerdal House, Goodmead Road, Orpington,  
Kent BR6 0HX  
Tel. +44 (0)1689 876634, Fax +44 (0)1689 873800  
E-mail: customerservice@laerdal.co.uk

**USA and Latin America:**  
LAERDAL MEDICAL CORPORATION  
167 Myers Corners Road, PO Box 1840  
Wappingers Falls, New York 12590-8840  
Tel. (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770  
Fax (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545  
E-mail: customerservice@laerdal.com

**MEDICAL PLASTIC LABORATORY, INC.**  
PO Box 38, 226 FM  
116 South Gatesville, Texas 76528-0038  
Tel. (800) 433-5539, (254) 865-7221  
Telefax (254) 865-8011  
E-mail: services@mpltx.com



Se op, til den ledene inden for genoplivning



Laerdal Silicone Resuscitators



# Laerdal Silikone Resuscitator



Gennem de sidste 35 år er Laerdal Silikone Resuscitator og masker blevet anerkendt pga. deres høje kvalitet, effektivitet og værdi. I et nyt design, men stadig lavet af silikone og gennemsigtigt polysulfon som sikrer lang holdbarhed, opfylder Laerdals Silikone Resuscitator både behandlerens og patienternes behov.

## Sikkerhed

- Nem at samle.
- Standard 15/22mm kobling.
- Designet for at hindre genindånding af udåndingsluft
- Integreret indsnings-/reservoirventil\* tillader brug af atmosfærisk luft uden ilt tilskud
- Funktionstest gør det nemmere at opdage forkert samling.
- 35cm H<sub>2</sub>O overtryksventil nedsætter risikoen for ventilation med for stort tryk.
- Patientventilen tillader patienter med spontan respiration at indånde ilt med et minimum af modstand.
- Alle komponenter og dele er latex-fri; alt tilbehør er latex-frit.
- Med de gennemsigtige silikone- og polysulfon-dele kan fremmedlegemer nemt opdages visuelt.

## Effektivitet

- Resuscitatorens integrerede indsnings-/reservoirventil og patientventilen muliggør en effektiv og hurtig genopfyldning af posen.
- Alle modeller leverer, når de anvendes sammen med ilt-reservoirposen, en høj iltkoncentration selv ved moderat ilttilskud.

## Brugsøkonomi

- Det anvendte materiale giver produktet en lang levetid, og undersøgelser viser, at udstyret kan holde til desinficering og sterilisering på højt niveau.
- En effektiv integreret indsnings-/reservoirventil med reservoirpose sikrer optimal udnyttelse af ilt.
- Resuscitatorens kan foldes, hvilket sparer opbevaringsplads.
- Nem dekontamineringsprocedure minimerer rengøringsstiden og nedsætter den nødvendige lagerbeholdning.



Maske overlæget kan anvendes som ekstra støtte til masken eller til at fastholde Laerdal silikone masken til patientens ansigt. Hovedrem fås som tilbehør.



Baby



Til patienter på 2,5 kg eller derunder



Børn



Til patienter på mellem 2,5 kg og 25 kg



Voksen



Til patienter på over 25 kg



En 35cm H<sub>2</sub>O overtryksventil er standard på alle børne- og baby modeller.

## Resuscitatoren

Hurtig genopfyldning selv ved høje eller lave temperaturer. Fremragende føling med patientens lunge-compliance.

## Patientventil

Giver maksimal effekt og forhindrer samtidig genindånding af udåndingsluft

## Drejekobling

Tillader ventilation i forskellige positioner

## Maske/maske overlæg

Er gennemsigtige, så mund og næse kan ses.

## Integreret indsnings-/reservoirventil

Det gode design er med til at skabe en sikker og effektiv funktion. Udstyret består af meget få dele, hvilket letter rengøringen. Og integrationen af indsnings-/reservoirventilen i en og samme del gør, at den kan anvendes med eller uden ilt-reservoirpose, hvilket overflødiggør yderligere indkøb af dele.



## Mærkning

Er din Laerdal Silikone Resuscitator blevet væk? Nu behøver du ikke at lede længere! Vi mærker halsmuffen på din Laerdal Silikone Resuscitator med navnet på din redningsenhed, institution eller afdeling, hvilket mindsker risikoen for at den bortkommer eller bliver stjålet.

Mærkning er gratis ved køb af minimumsmængde.

Kontakt din Laerdal-forhandler, hvis du vil vide mere.

## Dekontaminering/sterilisering


Følgende, anbefalede metoder giver dig større fleksibilitet:

- Dampautoklavering ved 132-137°C
- Cidex Glutaraldehyd
- Cidex OPA (ortho-phthalaldehyd)
- Natrium-hypoklorit



## Forlængerslange af silikone

Forlængerslangen af silikone, der fås som ekstraudstyr, muliggør anvendelse af udstyret under bevægelse og mindsker risikoen for, at endotracheale tuben rykker sig, idet den giver behandleren fleksibilitet ved ventilation.

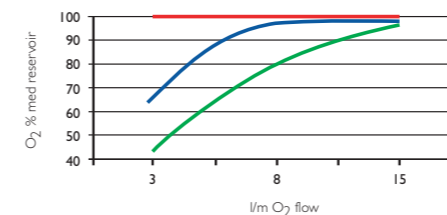

## Spontan respiration

Patientventilen er designet så den tillader patienter med spontan respiration at indånde op til 100% ren ilt med minimal modstand.