

Den nye generation af gennemsigtige Engangs Resuscitators



Laerdal introducerer The BAG II

Den nye Engangs Resuscitator har alle de fordele, der findes i en flergangs resuscitator, men kan kun bruges en gang. Praktisk, alsidig og nemt, når du behøver det mest.

I forlængelse af Laerdal's indsats med at tilbyde kvalitetsprodukter, der hjælper til at redde liv, introducerer vi The BAG II Engangs Resuscitators til vores kunder.

Et vigtigt supplement til vores komplette produktsortiment til prehospital, in-hospital og militær brug.



The BAG II Produktbeskrivelse og fordele

Tre størrelser resuscitators; voksen, barn, baby

- Den rette størrelse til patienten
- Giver brugeren mulighed for at vælge den rette størrelse, så risikoen for overventilation mindskes

Engangs / Disposable

- Nem at bruge, reducerer risikoen for bakterieoverførelse
- Altid klar til brug

Latex-fri

- Sikker at anvende for latex-sensitive patienter og personale

Overtryksventil (35 cm)

- Kun baby/barn modeller

Masker

- Blød klar maske, så patientens hudfarve kan observeres

Temperatur

- Fungerer godt både ved høje og lave temperaturer
- Arbejdtemperatur -18°C til +50°C

Justerbar håndrem

- Sikrer optimalt håndgreb

Forstærket ikke- kinkende

O₂ slange

- Forhindrer tillukning

Lukket System ilt reservoirpose

- Tillader 99-100% O₂ koncentration

PVC udførelse


- God fornemmelse af lunge modstand
- Gennemsigtig
- Ergonomisk design

Universal

Star-Lumen

Oxygen Slange

- Behøver ingen adapter, slangen monteres direkte på flowmeter

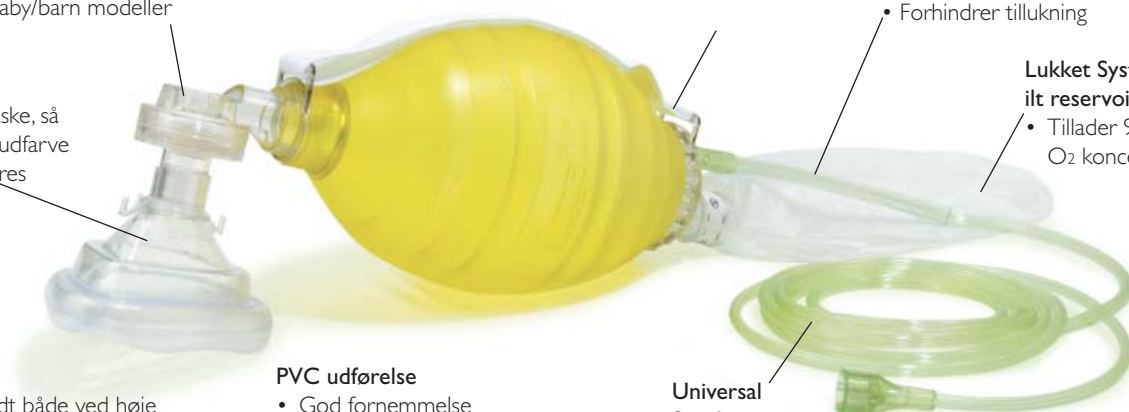

Produkter

Resuscitators med håndtag

- 845011 The BAG II Voksen Engangs Resuscitator (med str. 5 maske)
845021 The BAG II Barn Engangs Resuscitator (med manometer port, 35cm H₂O overtryksventil og str. 3 maske)
845031 The BAG II Baby Engangs Resuscitator (med manometer port, 35cm H₂O overtryksventil og str. 1 maske)
845041 The BAG II Voksen Engangs Resuscitator (med str. 4 maske)

Engangs ansigtsmasker

- 845050 Engangsmaske str. 3 med inflation port * (pk. 20 stk.)
845060 Engangsmaske str. 4 med inflation port * (pk. 20 stk.)
845070 Engangsmaske str. 5 med inflation port* (pk. 20 stk.)

* sælges i pakker med 20 stk.

Engangs PEEP ventil

- 845040 Engangs PEEP ventil (med adapter)**
845080 Engangs Expiratory Diverter** (Eksspirationsafleder)

** sælges i pakker med 10 stk.

For more product information, please visit
www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives